


PHILIPS

Lumea

SC1997



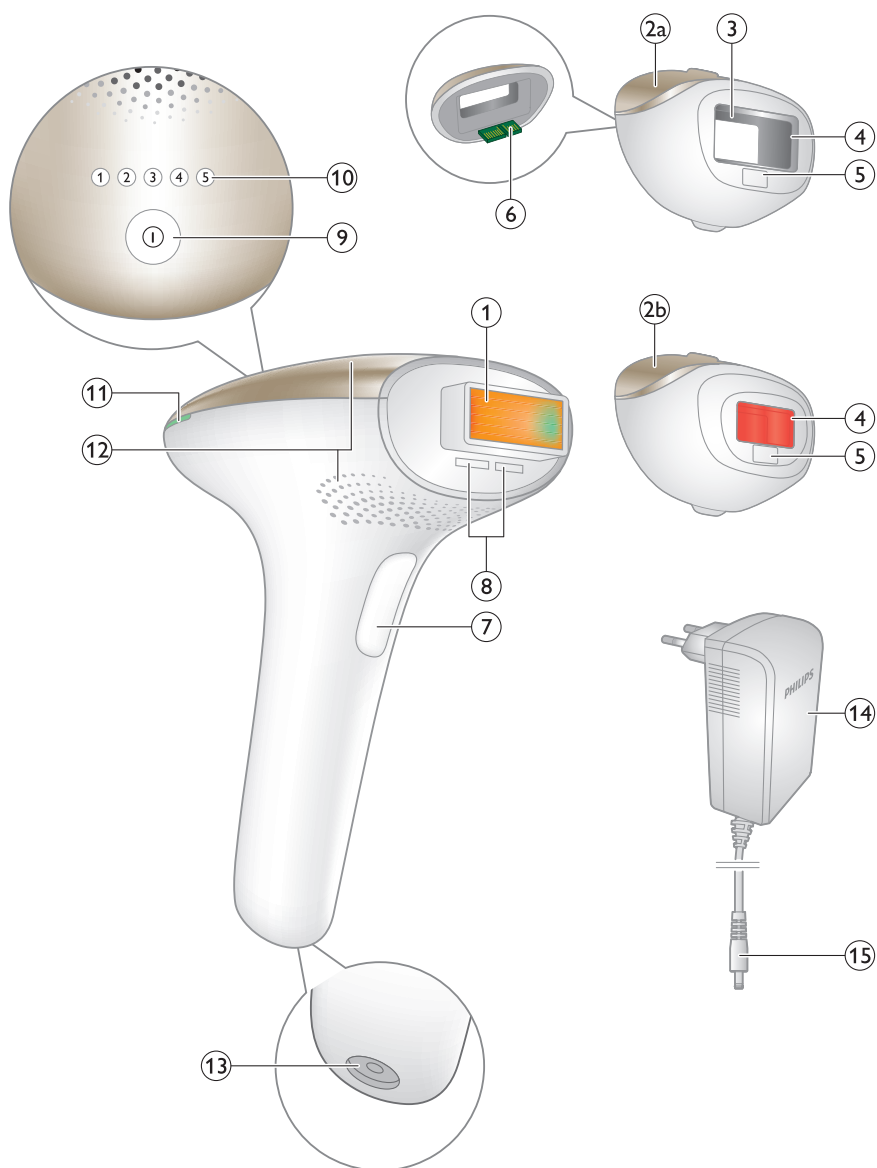

Вітаємо

Вітаємо у світі краси Lumea! Ви лише за кілька тижнів від гладкої шовковистої шкіри.

Пристрій Philips Lumea Essential використовує технологію інтенсивного світлового імпульсу (IPL) — один із найефективніших методів, що надовго запобігає повторному росту волосся. Раніше ця технологія використовувалася лише у професійних салонах краси. У співпраці з провідними дерматологами ми пристосували її для простого та ефективного використання в домашніх умовах. Лагідний фотоепілятор Philips Lumea зручний і ефективний, а також пропонує широкий вибір комфортної інтенсивності світла. Залиште небажане волосся в минулому. Насолоджуйтеся відчуттям гладкої шкіри без волосся та виглядайте неперевершено щодня.

Щоб сповна скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome. Щоб отримати додаткову інформацію, відвідайте сайт www.philips.com/lumea. Тут Ви знайдете поради наших експертів, навчальне відео, а також часті запитання. Отримайте максимальне задоволення від фотоепілятора Lumea.

Огляд пристрою

- 1 Віконце для випромінювання світла із вбудованим УФ-фільтром
- 2 Насадки
 - a Насадка для тіла
 - b Насадка для точної обробки
- 3 Рефлектор всередині насадки
- 4 Вбудована система безпеки
- 5 Датчик кольору шкіри
- 6 Електронні контакти
- 7 Кнопка випромінювання
- 8 Отвір для електронних контактів
- 9 Кнопка "увімк./вимк."
- 10 Індикатори інтенсивності (1–5)
- 11 Індикатор "Готовий до випромінювання"
- 12 Вентиляційні отвори
- 13 Роз'єм пристрою
- 14 Адаптер
- 15 Мала вилка

Кому не можна використовувати фотоепілятор Lumea? Протипоказання

- У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо у вас V або VI тип шкіри (шкіра рідко або ніколи не обгорає на сонці та має темний колір). Це може спричинити шкірні реакції, зокрема гіперпігментацію, гіпопігментацію, сильне почервоніння або опіки.



- Пристрій не було перевірено на вагітних жінках або жінках, що годують грудьми, тому в жодному разі не використовуйте його, якщо Ви вагітні або годуєте грудьми.
- У жодному разі не використовуйте пристрій у наведених нижче випадках.
 - Якщо у Вас захворювання шкіри, наприклад рак шкіри в активній стадії; якщо у Вас був рак шкіри чи інші ракові захворювання на ділянках, які потрібно обробити.
 - Якщо ділянки, які потрібно обробити, перебувають у передраковому стані або на них багато нетипових родимих плям.
 - Якщо у Вас був колагеноз, зокрема утворювалися келоїдні рубці чи спостерігалось погане загоювання ран.
 - Якщо у Вас були судинні захворювання, наприклад варикозне розширення вен або ектазія судин, на ділянках, які потрібно обробити.
 - Якщо шкіра чутлива до світла, і на ній швидко виникають алергічні реакції.
 - Якщо Ви страждаєте на інфекційні захворювання, екзему, маєте опіки, запалені фолікули, відкриті рани, подряпини, простий герпес, поранення, ураження шкіри або гематоми на ділянках, які потрібно обробити.
 - Якщо ділянки, які потрібно обробити, було прооперовано протягом останніх трьох тижнів.
 - Якщо Ви страждаєте на епілепсію з чутливістю до миготіння світла.
 - Якщо Ви страждаєте на діабет, червону вовчанку, порфірію чи серцеву недостатність.
 - Якщо у Вас порушення згортання крові.
- Якщо у Вас хвороби, які пригнічують імунну систему (включаючи ВІЛ-інфекцію або СНІД).
- У жодному разі не використовуйте пристрій у наведених нижче випадках, пов'язаних із застосуванням лікарських препаратів.
 - Якщо шкіра обробляється або протягом останнього тижня її було оброблено препаратами, які містять альфа-гідрокислоти (АНА), бета-гідрокислоти (ВНА), ізотретиноїн для місцевого застосування та азелаїнову кислоту.
 - Якщо Ви протягом останніх 6 місяців приймали ізотретиноїн Accutane чи Roaccutane. Ці препарати можуть спричиняти вразливість шкіри до надривів, ран чи подразнення.
 - Якщо Ви вживаєте знеболюючі засоби, які зменшують чутливість шкіри до високих температур.
 - Якщо Ви приймаєте фотосенсибілізуючі препарати, ознайомтеся з інструкцією, що додається до них, і не використовуйте пристрій, якщо в інструкції вказано, що прийом препарату може спричинити фотоалергічні або фототоксичні реакції, а також якщо в разі його прийому потрібно уникати сонця.
 - Якщо Ви приймаєте антикоагулянти, зокрема великі дози аспірину, і лікування не передбачає можливості зробити однотижневу перерву перед кожним використанням пристрою, щоб вивести препарат з організму.
- Якщо Ви приймаєте препарати, які пригнічують імунну систему.
- У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках.



- Навколо очей і біля брів.
- На сосках, ареолах, малих статевих губах, піхві, анусі та всередині ніздрів і вух.
- Чоловікам забороняється використовувати пристрій на мошонці та обличчі.
- Поверх або біля таких чужорідних тіл, як силіконові імпланти, кардіостимулятори, місця для підшкірних ін'єкцій (введення інсуліну) чи пірсинг.
- На родимих плямах, веснянках, збільшених венах, потемнілих пігментованих ділянках шкіри, шрамах, аномаліях на шкірі без консультації лікаря. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри й ускладнити виявлення хвороб, пов'язаних зі шкірою.
- На бородавках, татуюваннях або перманентному макіяжі. Це може призвести до опіку чи зміни кольору шкіри.
- На ділянках, для яких використовуються дезодоранти тривалої дії. Це може спричинити шкірні реакції.
- У жодному разі не використовуйте пристрій, якщо Ви обгоріли на сонці, недавно засмагали або застосовували засоби для автозасмаги.

Примітка. Це неповний список. Якщо Ви не впевнені, чи можете користуватися пристроєм, радимо звернутися до лікаря.

Важлива інформація

Небезпечно



- Зберігайте пристрій і адаптер сухими.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся внутрішніх частин пошкодженого пристрою.
- Не вставляйте в пристрій жодних предметів.

Обережно

- Пристрій не призначено для використання дітьми й особами з послабленими відчуттями, фізичними або розумовими здібностями, окрім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їхнього життя.
- Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

- Пристрій не призначено для дітей віком до 15 років. Підлітки від 15 до 18 років можуть використовувати пристрій за згодою та/або в разі допомоги батьків чи осіб, які за них відповідають. Особи від 18 років можуть використовувати пристрій без жодних застережень.
- Завжди перевіряйте пристрій перед використанням. Не використовуйте пошкоджені пристрій чи адаптер. Завжди замінюйте пошкоджену частину пристрою оригінальним відповідником.
- Адаптер містить трансформатор. Не замінюйте адаптер на інший, оскільки це може спричинити небезпечну ситуацію.
- Не використовуйте пристрій, якщо пошкоджено УФ-фільтр віконця для випромінювання світла.
- Не використовуйте насадку для точної обробки, якщо розбито фільтрувальне скло.

Увага




- Пристрій не можна мити. Ніколи не занурюйте зарядний пристрій у воду та не мийте його під краном.
- З міркувань гігієни пристроєм має користуватися лише одна особа.
- Вибирайте для пристрою лише ті налаштування, які підходять для Вашого типу шкіри. Використання інших налаштувань, ніж рекомендовані, може підвищити ризик виникнення алергічних реакцій і побічних ефектів.
- Використовуйте цей пристрій лише за призначенням, як описано в посібнику користувача.
- Не використовуйте для чищення пристрою стиснене повітря, жорсткі губки, абразивні засоби чи рідини для чищення, такі як бензин чи ацетон.
- Перевірку та ремонт пристрою слід проводити виключно в сервісному центрі, уповноваженому Philips. Ремонт, виконаний неспеціалістами, може викликати дуже небезпечну ситуацію для користувача.


Електромагнітні поля (ЕМП)

Цей пристрій Philips відповідає всім чинним стандартам і правовим нормам, що стосуються впливу електромагнітних полів.


Як працює IPL

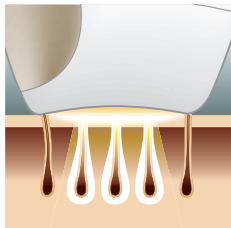

За технологією IPL шкіра обробляється лагідними імпульсами світла, які поглинаються коренями волосся. Що темніше волосся, то краще воно поглинає імпульси світла.

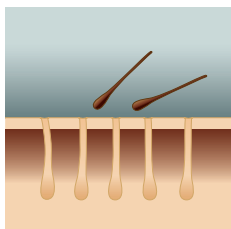


Імпульси світла стимулюють перехід волоссяних фолікул у фазу спокою. Внаслідок цього волосся випадає, а його ріст сповільнюється, залишаючи шкіру шовковистою протягом тривалого часу.

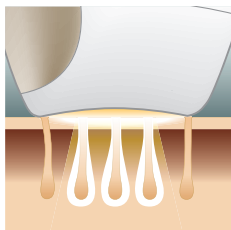

Цикл росту волосся складається з кількох фаз. Технологія IPL ефективна лише у фазі росту волосся. Однак не все волосся перебуває у фазі росту одночасно. Тому, щоб ефективно видалити все волосся у фазі росту, ми рекомендуємо виконувати основну процедуру раз на 8 тижнів, а потім застосовувати пристрій точково..

Примітка. Фотоепілятор Lumea неефективний на світлому волоссі, адже воно поглинає недостатньо світла. Нижче наведено кольори волосся, для яких ефективно застосовувати Фотоепілятор Lumea.

Колір волосся на тілі

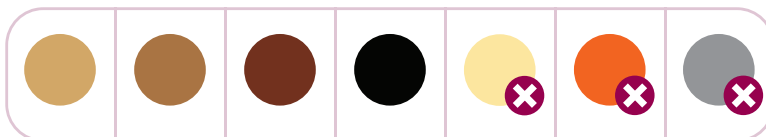

Очікувані результати

Одразу ж після першого використання

Після першого використання волосся випаде протягом 1–2 тижнів. Протягом перших тижнів після початкових процедур волосся може продовжувати рости. Це відбувається тому, що під час використання не все волосся перебувало у фазі росту.

Після 2–3 використань


Після 2–3 використань ріст волосся має помітно зменшитися. Однак, щоб ефективно видалити все волосся, потрібно продовжувати обробку з рекомендованим графіком.

Після 4–5 використань

Після 4–5 використань ріст волосся на ділянках, які Ви обробляєте пристроєм Lumea, має суттєво зменшитися. Густота волосся також має зменшитися. Повторюйте процедуру кожні 4–8 тижнів, щоб забезпечити найкращий результат.

Поради щодо засмаги

Засмага на сонці або в солярії

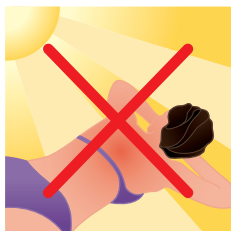

Засмага під сонцем або в солярії впливає на чутливість і колір Вашої шкіри. Тому дуже важливо дотримуватися наведених нижче порад:

- Після видалення волосся засмагати можна не раніше, ніж за 48 годин. Навіть після 48 годин перевіряйте, чи оброблена шкіра не червона.
- Якщо після обробки не минуло 48 годин, а Вам потрібно вийти під сонячні промені (не для засмаги), покрийте оброблені ділянки сонцезахисним кремом (із сонцезахисним фільтром 50+). Потім протягом ще двох тижнів користуйтеся сонцезахисним кремом із сонцезахисним фільтром 30+.
- Після засмаги користуватися фотоепілятором Lumea можна щонайменше за 2 тижні. Випробуйте пристрій на шкірі, щоб визначити відповідний рівень інтенсивності світла.
- Не використовуйте фотоепілятор Lumea на ділянках тіла, що обгоріли на сонці.

Примітка. Якщо випадкові або непрямі сонячні промені потрапляють на шкіру, це не вважається засмагою.


Використання кремів для засмаги

Якщо Ви використовуєте лосьйон для штучної засмаги, то перед використанням фотоепілятора Philips Lumea зачекайте, поки штучна засмага повністю зникне.

Перед використанням Lumea

Підготування шкіри

Перед використанням фотоепілятора Lumea потрібно підготувати шкіру: видалити волосся з поверхні шкіри. Це надасть змогу частинам волосся під шкірою поглинути світло та забезпечить ефективну обробку. Волосся можна поголити або видалити за допомогою тримера, фотоепілятора чи воску. Не видаляйте волосся за допомогою спеціальних кремів. Хімічні речовини можуть спричинити шкірні реакції.

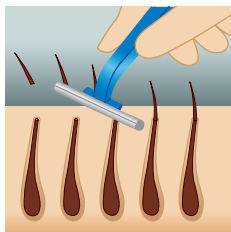

Якщо Ви зробили воскову епіляцію, не використовуйте Lumea протягом 24 годин, щоб шкіра відпочила. Перед використанням пристрою ми також рекомендуємо прийняти душ, щоб переконатися, що на шкірі не залишилося воску.

- 1 Підготуйте ділянки, які потрібно обробити за допомогою Lumea.
- 2 Очистьте шкіру та перевірте, чи вона повністю суха, на ній немає волосся й жирних речовин.

Примітка. Коли волосся перестане рости (а це зазвичай відбувається після 4–5 процедур), готувати шкіру перед використанням пристрою більше не потрібно.

Випробування пристрою на шкірі

Якщо Ви використовуєте пристрій вперше чи після недавньої засмаги, випробуйте його на кожній ділянці, яку потрібно обробити. Випробування необхідне, щоб перевірити реакцію шкіри та визначити потрібну інтенсивність світла для кожної ділянки тіла.


- 1 Виберіть ділянку поблизу тієї, що потрібно обробити.
- 2 Увімкніть пристрій. Перевірте, що вибрано інтенсивність 1.
- 3 Піднесіть пристрій до шкіри та натисніть кнопку випромінювання, щоб подати імпульс світла.
- 4 Пересуньте пристрій по шкірі на наступну ділянку, яку потрібно обробити.
- 5 Збільште інтенсивність світла на один рівень, подайте імпульс і пересуньте пристрій на наступну ділянку. Повторіть ці дії для всіх рівнів у межах, рекомендованих для Вашого типу шкіри.
- 6 Випробувавши пристрій, зачекайте 24 години та перевірте оброблені ділянки. Якщо виникають шкірні реакції, для подальшого використання зменште інтенсивність до рівня, який не спричиняє шкірних реакцій.

Використання фотоепілятора Philips Lumea

Датчик кольору шкіри


Датчик кольору шкіри — це вбудований елемент безпеки, який визначає колір шкіри перед кожним використанням і час від часу протягом обробки. Якщо пристрій виявить занадто темну шкіру для обробки за допомогою Lumea, він автоматично вимкнеться, щоб запобігти появленню шкірних реакцій. У такому разі пристрій не подаватиме імпульсів світла, навіть якщо натискати кнопку випромінювання.

Насадки

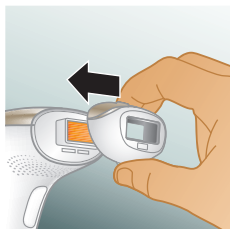

Встановлення та знімання

Щоб встановити насадку, просто притисніть її до віконця для випромінювання світла.

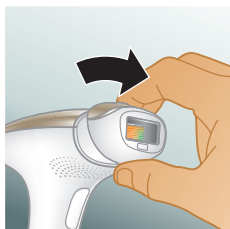

Щоб зняти насадку, потягніть її від віконця для випромінювання світла.

Насадка для тіла

За допомогою насадки для тіла можна видаляти небажане волосся на ділянках нижче шиї. Наприклад, її можна використовувати для швидкої обробки більших ділянок тіла, таких як ноги.


Насадка для точної обробки

Насадка для точної обробки має додатковий вбудований оптичний фільтр, що підвищує безпеку використання. Тому за її допомогою можна видаляти небажане волосся з верхньої губи, підборіддя та бакенбардів. Також ця насадка ідеально підходить для обробки важкодоступних ділянок, зокрема, пальців ніг, лінії бікіні та пахв. Утім, ніколи не використовуйте Lumea біля брів.

Вибір правильної інтенсивності світла

Фотоепілятор Lumea має 5 різних рівнів інтенсивності світла. Можна налаштувати належний рівень інтенсивності світла відповідно до кольору Вашої шкіри.

- 1 Рекомендовані параметри див. у таблиці нижче.
- 2 Щоб налаштувати інтенсивність світла, натискайте кнопку "увімк./вимк.", доки не буде вибрано потрібне налаштування. Відповідний індикатор інтенсивності засвітиться.

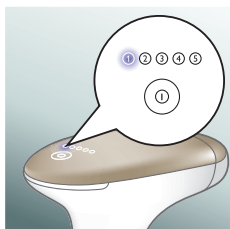

Примітка. Якщо ваша шкіра занадто темна, пристрій автоматично вимикається, щоб запобігти появленню шкірних реакцій. Вбудований датчик кольору шкіри не визначає потрібний рівень інтенсивності світла, даючи Вам можливість самостійно вибирати комфортну інтенсивність.

- 3 Фотоепілятор Lumea у жодному разі не має спричиняти біль. Якщо Ви відчуваєте дискомфорт, інтенсивність світла слід знизити.
- 4 Якщо Ви недавно засмагали, випробуйте пристрій на невеликій ділянці шкіри, щоб визначити належний рівень інтенсивності світла.


Тип шкіри	Колір шкіри	Налаштування інтенсивності світла
I	Білий; ви завжди обгораєте на сонці, ніколи не засмагаєте.	4/5

II	Бежевий; ви легко обгораєте на сонці, мінімально засмагаєте.	4/5
III	Світло-коричневий; ви легко обгораєте на сонці, повільно засмагаєте до світло-коричневого.	4/5
IV	Середньо-коричневий; ви рідко обгораєте на сонці, швидко й добре засмагаєте.	3/4
V	Темно-коричневий; ви рідко обгораєте на сонці, дуже добре засмагаєте.	Вам не можна використовувати пристрій.
VI	Коричнювато-чорний або темніший; ви рідко або ніколи не обгораєте на сонці, дуже темна засмага.	Вам не можна використовувати пристрій.




Примітка. Є багато причин, через які в різний час і в різних ситуаціях шкіра може реагувати по-різному.

Як тримати пристрій

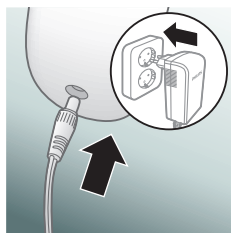

- 1 Перед використанням почистьте насадки та віконце для випромінювання світла.
- 2 Вставте малу вилку в зарядний пристрій, а адаптер – у розетку на стіні.
- 3 Увімкніть пристрій і виберіть належний рівень інтенсивності світла, який підходить для кольору Вашої шкіри.

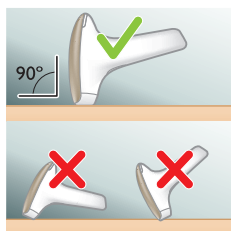

- 4 Прикладіть пристрій до шкіри під кутом 90° так, щоб насадка та вбудована система безпеки торкалися шкіри.
Вбудована система безпеки запобігає випадковій подачі імпульсів світла без контакту зі шкірою.



- 5 Сильно притисніть пристрій до шкіри, щоб забезпечити повний контакт. Пристрій автоматично визначає колір шкіри, після чого індикатор "Готовий до випромінювання" світлитиметься білим на знак того, що можна починати обробку.

Примітка. Якщо індикатор "Готовий до випромінювання" світлиться оранжевим, колір вашої шкіри не підходить для обробки, і пристрій автоматично вимкнеться. Спробуйте обробити ділянки зі світлішою шкірою.

Порада. Якщо Ви використовуєте Lumea, щоб моделювати лінію бікіні та хочете видалити не все волосся, перевірте, що під час обробки волосся, яке Ви хочете залишити, не потрапляє під датчик кольору шкіри, бо це може спричинити блокування пристрою..




- 6 Натисніть кнопку випромінювання, щоб подати імпульс світла. Ви маєте відчувати тепло.

Примітка. Світло, яке випромінює пристрій, безпечне для очей. Під час використання не потрібно одягати захисні окуляри. Використовуйте пристрій у добре освітленій кімнаті, щоб спалах був менш яскравим для очей.

- 7 Прикладіть пристрій до наступної ділянки, яку потрібно обробити. Інтервал між подачами імпульсів світла становить до 3,5 секунд. Імпульс світла можна подавати, коли індикатор "Готовий до випромінювання" знову засвітиться.

- 8 Щоб обробити всі ділянки, подавайте імпульси близько один до одного. Дієве світло виходить лише з віконця для випромінювання, отже потрібно частково накривати попередньо оброблену ділянку. Але завжди стежте за тим, щоб одна ділянка оброблялася лише один раз. Обробивши одну й ту саму ділянку тіла двічі, Ви не збільшите ефективність видалення волосся, а лише підвищите ризик виникнення шкірних реакцій.

- 9 Завершивши обробку шкіри, натисніть і утримуйте кнопку "увімк./вимк." протягом 2 секунд, щоб вимкнути пристрій.

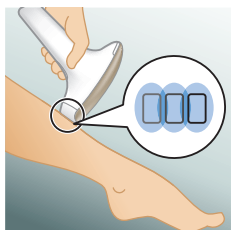

Режими подачі імпульсу світла: з відривом пристрою та без відриву


Епілятор Philips Lumea має два режими подачі імпульсу світла, щоб зручно видаляти волосся з різних ділянок тіла.

- Режим подачі імпульсу світла з відривом пристрою від шкіри ідеально підходить для малих ділянок та вигинів, наприклад колін або пахв. Просто натисніть і відпустіть кнопку випромінювання, щоб подати одиночний імпульс світла.
- Режим подачі імпульсу світла без відриву пристрою зручний для обробки більших ділянок тіла, наприклад ніг. Утримуйте натисненою кнопку випромінювання, коли пересуваєте пристрій по шкірі, щоб подавати кілька імпульсів поспіль.

Рекомендований графік застосування

Початкова фаза

Щоб забезпечити видалення всього волосся, перші 4–5 разів рекомендуємо використовувати фотоепілятор Philips Lumea раз на 2 тижні.

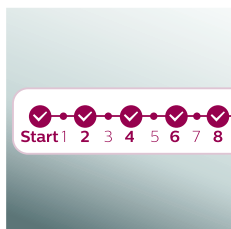


Фаза догляду

Після початкової фази (4–5 використань) рекомендуємо повторювати процедуру кожні 4–8 тижнів, якщо помітите, що волосся росте. Це забезпечить найкращі результати та гладку шкіру протягом місяців. Інтервал між процедурами може відрізнятися залежно від індивідуальних особливостей організму та ділянки тіла.



Рекомендована насадка та тривалість обробки ділянки

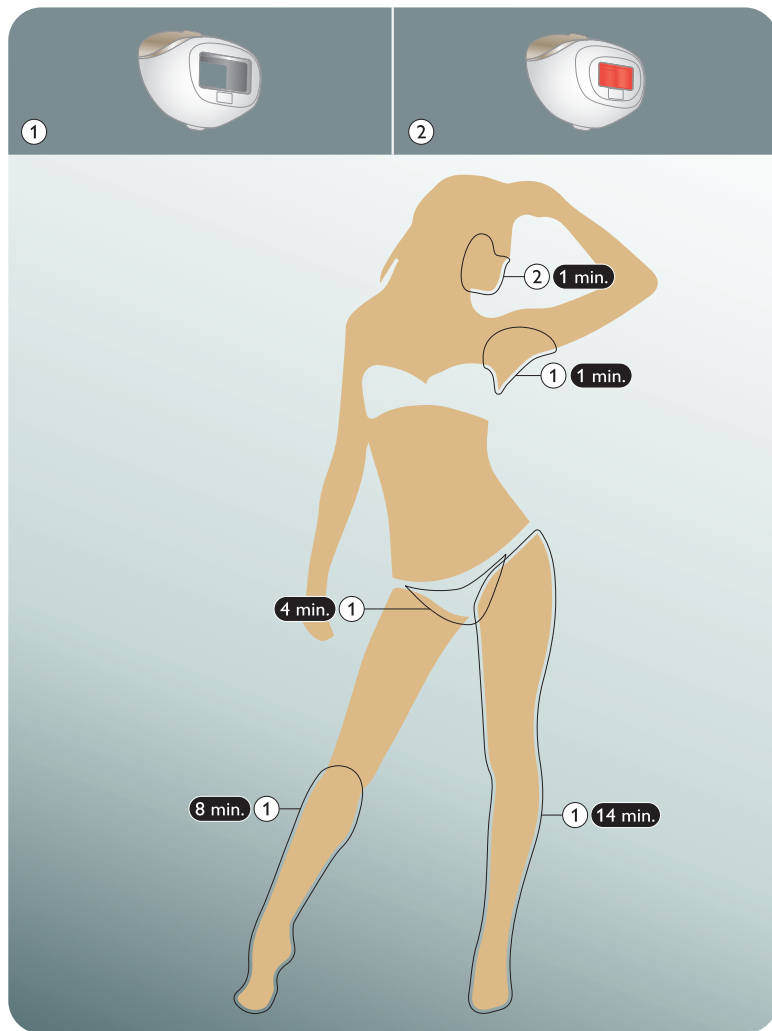

Після використання

Звичайні шкірні реакції

Шкіра може трохи почервоніти та/або може виникнути відчуття поколювання чи тепла. Це абсолютно безпечно та швидко минає.

Гоління або обробка світлом одразу після нього можуть спричинити сухість шкіри та свербіння. Оброблену ділянку можна охолодити, приклавши до неї пакет із льодом або вологу махрову серветку. Якщо сухість не минає, через 24 години після видалення волосся можна скористатися неароматизованим зволожуючим засобом.

Нечасті побічні ефекти

- Опіки, сильне почервоніння та набряки трапляються рідко. Вони з'являються, якщо рівень інтенсивності світла не підходить для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом трьох днів, радимо звернутися до лікаря. Почекайте з наступною процедурою, доки подразнення на шкірі повністю не зникне, і наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла.
- Зміна кольору шкіри трапляється дуже рідко. Оброблена ділянка шкіри може потемніти (гіперпігментація) або посвітліти (гіпопігментація). Це відбувається, якщо рівень інтенсивності світла занадто високий для кольору вашої шкіри. Якщо ці симптоми не зникають протягом двох тижнів, радимо звернутися до лікаря. Не обробляйте уражені ділянки, доки симптоми не зникнуть і шкіра не набуде звичного кольору.
- Запалення та інфекції шкіри трапляються дуже рідко внаслідок використання пристрою на ранах або порізах, які з'явилися після гоління, на вже наявних ранах чи ділянках із волоссям, що вросло.
- Сильний біль може виникати під час або після видалення волосся, якщо ви: використовували пристрій на непоголеній шкірі, встановили надто високий для свого кольору шкіри рівень інтенсивності світла, кілька разів обробили одну ділянку, використовували пристрій на відкритих ранах, запалених та інфікованих ділянках, татуваннях, опіках тощо.

Подальший догляд


Після закінчення процедури ділянку можна обробляти лосьйоном, кремом, дезодорантом та іншими зволожуючими засобами або косметикою. Якщо після видалення волосся на шкірі з'явилося подразнення або почервоніння, зачекайте доки воно зникне, і лише потім наносьте будь-які засоби. Якщо подразнення з'явилося після того, як Ви нанесли ці засоби, змийте їх водою.

Очищення та зберігання

- 1 Після використання вимкніть пристрій, від'єднайте від розетки та дайте йому охолонути.
- 2 Зніміть насадку.



- 3 Змочіть м'яку ганчірку, що входить у комплект, кількома краплями води та протріть нею такі частини:
 - віконце для випромінювання світла
 - зовнішню поверхню насадок
 - рефлектор всередині насадок
 - червоне фільтрувальне скло всередині насадки для точної обробки

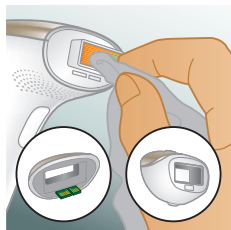

4 Дайте всім частинам висохнути.

5 Зберігайте пристрій у сухому та незапиленому місці при температурі від 0 °C до 60 °C.

Гарантія та підтримка

Якщо вам необхідна інформація чи підтримка, відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або прочитайте гарантійний талон.

Утилізація



- Цей символ означає, що поточний виріб не підлягає утилізації зі звичайними побутовими відходами (згідно з директивою ЄС 2012/19/EU).
- Дотримуйтеся правил роздільного збору електричних і електронних пристроїв у Вашій країні. Належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Технічні характеристики

Номінальна напруга	100–240 В
Номінальна частота	50–60 Гц
Номінальна потужність	36 Вт
Захист від електричного шоку	Клас II
Рівень захисту	IP 30 (EN 60529)
Умови експлуатації	Температура: +15–35 °C
	Відносна вологість: 30–95%
Спектр насадки для тіла	>530 нм
Спектр насадки для точної обробки	>600 нм

Усунення несправностей

У цьому розділі розглядаються основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо наведена нижче інформація не допоможе вирішити проблему, перегляньте список поширених запитань на сайті

www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Пристрій або адаптер нагрівається під час використання	Це нормально.	Жодних заходів вживати не потрібно.
Після прикладання пристрою до шкіри, імпульс світла не подається. Індикатор "Готовий до випромінювання" блимає, а потім безперервно світиться оранжевим.	Ви маєте занадто темний колір шкіри на ділянці, що обробляється.	Використовуйте Lumea на ділянках зі світлішою шкірою.
Після прикладання насадки до шкіри індикатор "Готовий до випромінювання" не засвічується, однак працює вентилятор охолодження.	Спрацював захист від перегрівання.	Коли вмикається захист від перегрівання, вентилятор продовжує працювати. Не вимикайте пристрій і дайте йому охолонути близько 15 хвилин, перш ніж продовжити використання.
Індикатор "Готовий до випромінювання" світиться білим, але пристрій не подає імпульсу світла, коли я натискаю кнопку випромінювання.	Пристрій необхідно перезапустити.	Щоб перезапустити пристрій, вимкніть його та знову ввімкніть.
Не вдається збільшити або зменшити інтенсивність світла. Усі індикатори інтенсивності почергово блимають.	Пристрій необхідно перезапустити.	Щоб перезапустити пристрій, вимкніть його та знову ввімкніть.
Пристрій видає дивний запах.	Насадка та/або фільтрувальне скло брудне.	Обережно почистьте насадку.
	Ви недостатньо ретельно видалили волосся з ділянки, що обробляється. Цей запах може спричиняти волосся, що спалахує.	Підготуйте шкіру перед використанням фотоепілятора Lumea.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Під час видалення волосся шкіра чутливіша, ніж зазвичай, або відчувається біль.	Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.	Перевірте, чи вибрано належну інтенсивність світла. Якщо потрібно, встановіть нижчу інтенсивність.
	Ви не видалили волосся з ділянок, що обробляються.	Підготуйте шкіру перед використанням фотоепілятора Lumea.
	Пошкоджено УФ-фільтр віконця для випромінювання світла.	Якщо УФ-фільтр віконця для випромінювання світла пошкоджено, не використовуйте пристрій. Зверніться до місцевого Центру обслуговування клієнтів, дилера або сервісного центру Philips.
	Ви видаляли волосся на ділянках, для яких цей пристрій не призначений.	У жодному разі не використовуйте пристрій на поданих нижче ділянках: статевих губах, анусі, сосках, ареолах, губах, а також всередині ніздрів і вух, навколо очей і біля брів. Чоловікам забороняється використовувати пристрій на мошонці та обличчі.
Реакція на шкірі після процедури не зникає довше, ніж зазвичай.	Вибрано надто високий рівень інтенсивності світла.	Наступного разу встановіть нижчу інтенсивність світла. Див. розділ "Використання фотоепілятора Philips Lumea", підрозділ "Налаштування належної інтенсивності світла".
Результати видалення волосся незадовільні.	Вибрано надто низький рівень інтенсивності світла.	Наступного разу виберіть вищий рівень інтенсивності світла.
	Ви не обробили ділянку, прилеглу до раніше обробленої.	Щоб обробити всі ділянки, подавайте імпульси близько один до одного.
	Використання пристрою неефективне для вашого кольору волосся на тілі.	Видалення волосся неефективне, якщо на ділянці, яка обробляється, волосся дуже світле, біле або руде.
	Ви не використовуєте пристрій із рекомендованою частотою.	Щоб успішно видалити волосся, рекомендуємо дотримуватися графіка застосування пристрою. Можна скоротити інтервал між процедурами, але не обробляйте ділянки більше одного разу на 2 тижні.
	Ваше волосся може реагувати на застосування інтенсивного імпульсного світла повільніше.	Продовжуйте користуватися пристроєм протягом щонайменше 6 місяців, оскільки протягом цього часу ріст волосся може поступово уповільнюватися.

Проблема	Можлива причина	Вирішення
Насадка для тіла не має вбудованого фільтрувального скла або віконця.	Це нормально.	Насадка для тіла не має фільтрувального скла або віконця.



4222.100.6636.2

© 2016 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) or their respective owners.

www.philips.com
4222.100.6636.2