


Решам

Ирригатор полости рта

Инструкция

Модель – FC169/WF-9

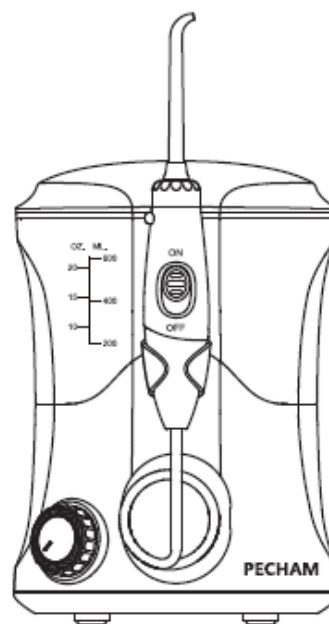

Спасибо Вам, что выбрали наш ирригатор полости рта!

Вы на пути к более здоровым деснам и более здоровой улыбке!

С комбинацией давления воды и пульсацией, ирригатор полости рта удаляет вредные бактерии глубоко между зубами и под линией десны, где зубная щетка не достает.

| | |
|--|---|
|  | <p>Традиционная чистка не может легко достать спрятанные остатки пищи и вредные бактерии</p> |
| <p>Использование флосса имеет ограниченный доступ ниже линии десны</p> |  |
|  | <p>Чистка ирригатором полости рта Удаляет остатки пищи в труднодоступных местах и вредные бактерии с высокой частотой пульсации струи воды</p> |
| <p>Аксессуары Главные прибор (включая резервуар) 1 шт Инструкция 1 шт</p> | <p>Насадки - 7 штук</p> <ul style="list-style-type: none"> • классические насадки 3 шт • пародонтологическая насадка 1 шт • ортодонтическая насадка 1 шт • насадка для удаления налета 1 шт • ложка для чистки языка 1 шт |

Важные меры предосторожности

Когда Вы используете электрические продукты, особенно когда присутствуют дети, базовые меры предосторожности должны быть соблюдены, включая следующие:


Опасность – для снижения риска удара током

- Всегда вынимайте из розетки данный продукт незамедлительно после использования
- Не используйте во время приема ванной
- Не размещайте и не храните продукт где он может упасть или столкнуться в ванную или раковину
- Не размещайте и не роняйте в воду или другую жидкость
- Не доставайте продукт, который упал в воду. Отсоедините от сети немедленно.

Предупреждение – для уменьшения риска возгорания, поражения электрическим током, пожара.

- Продукт никогда не оставляйте без присмотра, когда он включен в розетку.
- Тщательный контроль если необходимо, когда этот продукт используется возле детей или людей с ограниченными возможностями;
- Используйте этот продукт только по его предназначению как описано в данной инструкции. Не используйте крепления, которые не рекомендованы производителем.
- Никогда не используйте данный продукт если у него поврежден шнур или вилка, если он не работает как положено если он упал или был поврежден, или упал в воду. Возвратите товар в сервисный центр для теста и починки.
- Держите шнур далеко от поверхностей, которые нагреваются.
- Никогда не блокируйте воздушные отверстия продукта и не размещайте его на мягких поверхностях, таких на кровать и диван, где воздушные отверстия могут быть заблокированы. Содержите воздушные отверстия свободными от волос, пыли и так далее.
- Никогда не используйте, когда спите или сонные.
- Никогда не роняйте или вставляйте никакой предмет в любое отверстие или шланг.
- Не используйте на открытом воздухе или где используются продукты аэрозоли (спрей) или где много кислорода.
- Подсоединяйте этот продукт только к правильно заземленной розетке. Смотрите инструкцию по заземлению.
- Отключайте данный продукт от сети, когда наполняете водой. Наполняйте резервуар водой до отметки указанной производителем. Не переполняйте.

Сохраните данную инструкцию

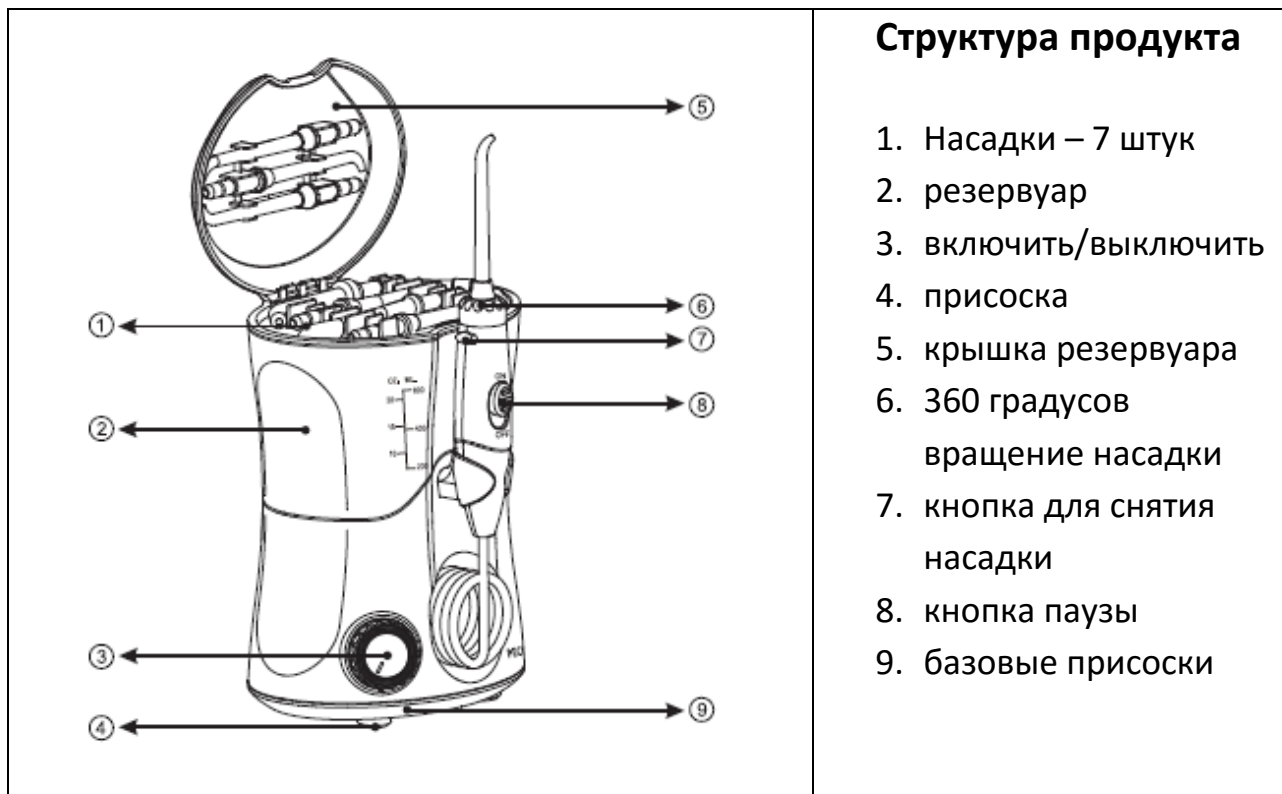

Разновидность насадок

| | | | | |
|----------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | | | |
| Классическая насадка | Пародонтологическая насадка | Ортодонтическая насадка | Насадка для удаления налета | Ложка для чистки языка |

Классическая насадка 3 шт: 3 цветных кольца. Для гигиенических целей.

Рекомендуется использовать 3-мя людьми соответственно (набор для семьи).





4 другие специальные насадки:



пародонтологическая насадка 1 шт
 ортодонтическая насадка 1 шт
 насадка для удаления налета 1 шт
 ложка для чистки языка 1 шт

Это устройство должно быть недосягаемо детьми все время.



Инструкция

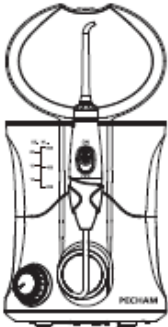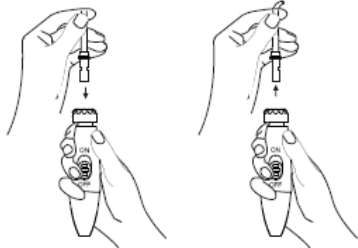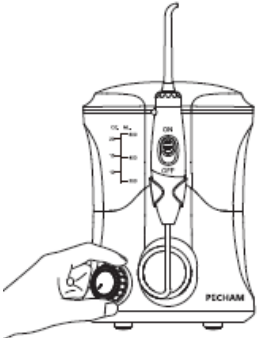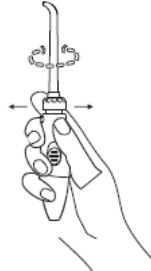

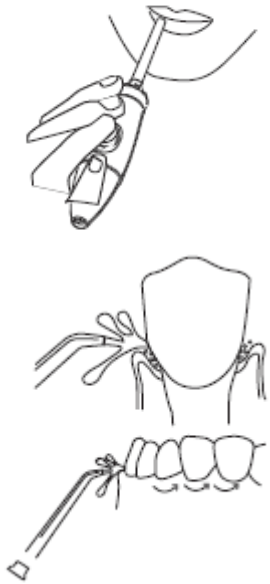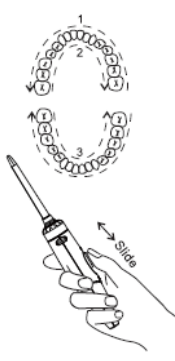
Вставьте в розетку. Если розетка контролируется настенным переключателем, убедитесь, что переключатель включен.

| | |
|---|--|
|  | <p style="text-align: center;">Подготовка</p> <p>Снимите резервуар крышки с основания, заполните резервуар тепловой водой, поставьте резервуар обратно на основание и плотно прижмите крышку.</p> |
| <p style="text-align: center;">Одеть и снять насадки</p> <p>Вставьте насадку в центр рукоятки, цветное кольцо защелкнется с рукояткой если насадка правильно зафиксирована на своем месте. Для того что бы снять насадку с ручки, нажмите на кнопку снятия насадки и вытащите насадку из ручки.</p> |  |
|  | <p style="text-align: center;">Регулировка напора струи воды</p> <p>Когда вы услышите «щелчок», это означает что переключатель открыт. Затем поверните по часовой стрелке для регулировки от небольшого к высокому. Девайс остановиться автоматически более чем через 3 минуты в любом положении. В следующий раз, когда начинаете нужно вернуться к «щелчку» для того что бы заработал девайс.</p> |
| <p style="text-align: center;">Использование ирригатора полости рта</p> <p>Наклонитесь над раковиной и поместите насадку в полость рта. Нацельте насадку на зубы. Свободной рукой включите/выключите прибор. Установите давление воды на необходимый уровень. Направьте поток воды поворачивая насадку на ручке.</p> |  |

| | |
|---|--|
|  | <p>Рекомендуемая техника чистки</p> <p>Направьте струю воды под углом 90 градусов к линии десны, немного прикройте губы для избежание разбрызгивания, но дайте возможность воде вытекать легко из рта в раковину. Для лучших результатов начните с области моляров (жевательные зубы) перемещаясь в направлении передних зубов. Ведите струю воды вдоль линии десны и останавливайтесь между зубами. Продолжайте данный процесс до тех пор, пока все области вокруг и между зубов не будут очищены.</p> |
| <p>Пауза</p> <p>Вы можете временно остановить поток воды в любое время опустив вниз кнопку на ручке.</p> <p>Когда закончили чистку зубов</p> <p>Выключите девайс, вылейте всю жидкость с резервуара для воды. Выключите прибор из сети.</p> |  |

Ознакомление с насадками для ирригатора

| | |
|--|---|
|  | <p>Пародонтологическая насадка может направлять воду или лекарственную жидкость в определенные места под линией десны.</p> |
| <p>Насадка для удаления налета</p> <p>Очищает труднодоступные места в полости рта с диапазоном 360 градусов, дополнительно очищая места которые зубная щетка не может очистить, остатки пищи и вредные бактерии расположенные в зубных трещинах и под линией десны. Это дает Вам приятный стоматологический опыт.</p> |  |
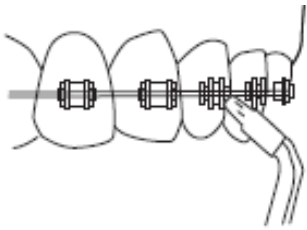
| | |
|--|---|
|  | <p>Ложка для чистки языка Поместите скребок для языка на язык перед включением ирригатора. Разместите скребок для языка на заднюю часть языка по центру, слегка тяните его вперед удерживая его в контакте с поверхностью языка.</p> |
| <p>Насадка для удаления налета Зубной налет — это группа бактерий, которые прилипают к поверхности зубов пока не минерализируются. Струя воды очень эффективна для предотвращения образования зубного налета. Насадка для удаления налета для очистки участков полости рта, которые сложно очистить, когда есть брекеты и другие стоматологические конструкции в полости рта.</p> |  |
|  | <p>Ортодонтическая насадка Специально уникально разработанная ортодонтическая насадка одновременно чистит и ополаскивает области вокруг брекетов и других стоматологических конструкций. Для использования ортодонтической насадки наклонитесь низко над раковиной и используйте щетинки щетки для очищения вокруг стоматологических конструкций. Вода будет течь через щетку, чтобы смыть мягкий зубной налет и остатки пищи.</p> |

Важно. Уход за ирригатором.

После использования любого специального раствора в резервуаре, найдите время после каждого использования ополоснуть ирригатор. Частично заполните резервуар теплой водой, направьте струю воды в раковину, включите устройство и дайте ему поработать до тех пор, пока резервуар не станет пустым. Это поможет насадке не забиться и поможет Вашему устройству прослужить дольше.

Очищайте продукт, когда, необходимо используя мягкую ткань и мягкое неабразивное моющее средство.

Перед очищением, пожалуйста, отключите от сети электрический прибор. Прежде чем помещать прибор в температуру заморозки, уберите резервуар и убедитесь, что прибор полностью пустой.

Сервисное обслуживание

1. После использования нашего ирригатора полости рта, убедитесь, что отсоединили шнур питания, и поставили резервуар для жидкости вверх дном на плоской поверхности, когда вода полностью высохла, положите в прохладное, сухое место вместе с чистыми вещами, его стоит разместить в коробку или подобное хранилище, если вы его не используете в течении длительного времени.
2. Когда прибор не исправен, вы можете связаться с продавцом с вопросами касающимися вопросами обслуживания.
3. Не разбирайте и не пытайтесь починить этот продукт, это может навредить, и компания не сможет затем устранить данную неполадку и продукт снимается с гарантии.
4. Когда шнур питания поврежден, обратитесь в наш сервисный центр для устранения неполадки. Не меняйте шнур питания и не включайте в розетку.
5. Если продукт не на гарантийном периоде, мы также предоставляем сервис по обслуживанию, вы должны будете оплатить стоимость необходимых материалов и затраты на работу.

Общие проблемы и решения

| Проблема | Причина | Решение |
|---|---|--|
| Утечка воды между насадками и ложкой для чистки языка и ручкой ирригатора | Насадки не полностью одеты | Снимите насадки и переустановите |
| У пародонтологической насадки мягкий наконечник | брак | замените на новую насадку |
| утечка воды между базой ирригатор и шнуром | повреждение шланга | может быть заменено продавцом или само обслуживающим комплектом |
| Утечка воды из резервуара для жидкости | нет клапана в резервуаре для жидкости или клапан резервуара для жидкости перевернут | Замените клапан резервуара для жидкости (свяжитесь с продавцом), поверните клапан в вверх вправо |
| Недостаточное давление воды | Резервуар для воды установлен не правильно | Убедитесь, что розетка работает, проверьте другой прибор |
| Вода не вытекает из устройства | мотор не работает | замените мотор |

Мы гарантируем первоначальному покупателю/владельцу этого нового продукта, у которого нет дефектов в течении 1 года.