

## Beauty Vital Skin



Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup urządzenia Garrett Beauty Vital Skin

### O produkcie

**Garrett Beauty Vital Skin** to wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji twarzy, wykorzystujące najpopularniejsze technologie kosmetyczne: **RF, EMS, wibracje soniczne** oraz **terapię światłem**.

Urządzenie głęboko stymuluje skórę, znacznie poprawiając jej kondycję oraz niweluje problemy skórne takie jak zmarszczki, utrata elastyczności, przebarwienia czy zmiany trądzikowe.



### KIERUNKI DZIAŁANIA:

- głębokie oczyszczanie skóry
- redukcja zmarszczek
- likwidacja przebarwień
- remodeling twarzy
- rozjaśnianie plam i wyrównanie kolorytu skóry
- wygładzanie i poprawa tekstury skóry
- konturowanie owalu twarzy
- redukcja cieni
- eliminacja tzw. „worków” pod oczami i ciemnych obwódok oczu
- leczenie trądziku
- witaminizowanie

### WSKAZANIA:

- skóra sucha, odwodniona
- zmarszczki, utrata jędrności
- podwójny podbródek
- szary, ziemisty kolor
- przebarwienia
- cera tłusta/mieszana, zanieczyszczona

### PRZECIWSKAZANIA:

- ciąży i karmienie piersią
- metalowe implanty,
- rozrusznik serca
- stany chorobowe organizmu, gorączka
- choroby tarczycy
- epilepsja
- przerwana ciągłość naskórka
- wstrzyknięcia typu botox, wypełnienia
- choroby wirusowe, bakteryjne i grzybicze skóry twarzy
- nowotwór
- aktywna opryszczka
- bezpośrednio po korzystaniu z sauny, solarium lub ekspozycji na słońce

### Funkcje produktu

**1. RADIOFREKWENCJA RF** – rodzaj terapii wykorzystującej promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości fal radiowych. Rozgrzewając skórę, stymuluje regenerację kolagenu, co daje efekt ujędrnienia i rozjaśnienia. Redukuje zmarszczki i blizny oraz przywraca skórze elastyczność i blask.

**2. ELEKTROSTYMULACJA EMS** – metoda wykorzystująca prąd impulsowy o niskiej częstotliwości. Polega na stymulacji mięśni, uelastycznia, napina skórę, niwelując jej obwisłość, przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej.

**3. WIBRACJE SONICZNE** – 8000 wibracji na minutę przyczynia się do skutecznego oczyszczenia skóry. Wpływa również na poprawę krążenia oraz dotlenienia cery, co sprawia, że substancje aktywne zawarte w kosmetykach szybciej się wchłaniają.

**4. ŚWIATŁO FOTONOWE** – wspomaga prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. W zależności od zastosowanej długości fali, wzmacnia układ immunologiczny, przyspiesza regenerację oraz przemianę materii, działa łagodząco na procesy zapalne, takie jak trądzik czy rozszerzone naczynia krwionośne. Długość fali wykorzystana w urządzeniu to od 465 do 700 nm.

- **światło czerwone:** 620 nm (± 5 nm) Wpływa na regenerację kolagenu, uelastycznia skórę. Jest odpowiednie dla wiotkiej i pomarszczonej skóry.
- **światło zielone:** 520 nm (± 5 nm) Redukuje przebarwienia, piegry, plamy postłoneczne i plamy starcze. Poprawia ogólny koloryt skóry oraz chroni ją przed przyszłym, potencjalnym kryzysem pigmentacyjnym. Może hamować nadmierną produkcję melanin.
- **światło niebieskie:** 465 nm (± 5 nm) Usuwa drobnoustroje oraz bakterie. Poprawia krążenie krwi, redukuje słaby trądzik i blizny potrądzikowe, zwęża pory i działa przeciwzapalnie. Posiada również właściwości kojące i uspokajające rumień, zaczerwienienia i obolałe miejsca.
- **światło żółte:** 590 nm (± 5 nm) Pobudza układ nerwowy, regeneruje mięśnie. Przywraca równowagę delikatnej i wrażliwej skórze.
- **światło różowe:** 700 nm (± 5 nm) Poprawia krążenie krwi, rozjaśnia cerę, przyspiesza wchłanianie składników kosmetycznych.

### Opis produktu



### Specyfikacja techniczna

<b>Nazwa produktu: Garrett Beauty Vital Skin</b>	
Częst. wibracji: 8000 (+/-100) rpm	Napięcie ładowania: 3,7 V
Pojemność baterii: 650 mAh	Czas ładowania: ok. 150 min
Waga produktu (netto): 108 g	Wymiary: 57 x 44 x 190 mm

**Więcej informacji na temat tego urządzenia dostępnych jest na stronie [www.garett.pl](http://www.garett.pl). Odwiedź naszą stronę, aby poznać więcej produktów i akcesoriów.**

### Instrukcja użytkowania

Przed i po każdym użyciu urządzenia, należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować głowicę. Przetrzyj ją chusteczką nasączoną płynem do dezynfekcji i wytrzyj do sucha. Nie wolno spryskiwać głowicy bezpośrednio płynem bądź zanurzać w wodzie.

- Usuń biżuterię oraz soczewki kontaktowe. Wykonaj demakijaż twarzy – w tym celu rekomendujemy użycie szcoteczki sonicznej **Garrett Beauty Clean Pro** lub **Garrett Beauty Clean Soft**.
- Aby włączyć urządzenie naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk zasilania.
- Uruchoimi się domyślny tryb pracy urządzenia (**Oczyszczanie/CLEAN**) oraz podświetlenie LED w kolorze zielonym.
- Wcisnąc ponownie przycisk zasilania, przełączamy kolejno tryby pracy urządzenia. Wyświetlacz pokazuje, w którym trybie aktualnie pracuje urządzenie.
- W zależności od osobistych potrzeb i odczuć, możemy zwiększyć/zmniejszyć moc urządzenia (**5 stopni mocy**), używając przycisku do regulacji mocy. Domyślnie urządzenie pracuje na najniższym poziomie.
- Aby oczyścić skórę, nanieś na skórę płyn micelarny i uruchom urządzenie w trybie **CLEAN**.
- Wykonuj ruchy kołiste bądź posuwiste, zawsze w kierunku od dołu ku górze oraz od środka twarzy na zewnątrz.

### Praca w pozostałych trybach:

W celu zwiększenia komfortu zabiegu oraz wzmocnienia działania urządzenia, zaleca się stosowanie preparatów przewodzących prąd. Zaaplikuj na twarz ampulkę, serum lub koncentrat dostosowany do potrzeb Twojej cery. Mogą to być preparaty o konsystencji wodno-żelowej bądź maseczki w płacie, nasączone substancjami odżywczymi. Jeśli preparat szybko się wchłania, zastosuj żel przewodzący do USG bądź inny preparat, zapewniający głowicy stały poślizg.

- Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk zasilania.
- Po zakończonym zabiegu oczyść skórę z nadmiaru żelu oraz urządzenie.

## OSTRZEŻENIE

Staraj się zamykać oczy podczas pracy z urządzeniem z aktywnym światłem fotonowym w ich okolicy bądź zabezpiecz je okularami ochronnymi.

Omijaj tarczycę pracując na szyi. Urządzenie musi być w stałym ruchu. Zbyt długa praca w jednym miejscu może skutkować poparzeniem skóry.



Wykonuj zabieg przesuwając urządzeniem zgodnie ze strzałkami na rysunku.

Nie należy używać urządzenia w tych partiach ciała.

Zabieg terapii fotonowej dozwolony jest w okolicach oczu, pod warunkiem ich zamknięcia i trzymania urządzenia poza obszarem oczodołów.

## Tryby pracy urządzenia

### 1. TRYB OCZYSZCZANIA (CLEAN)

Dzięki rozgrzaniu skóry oraz intensywnej wibracji otwiera pory, ułatwiając skuteczne usunięcie zanieczyszczeń. Zielone światło LED rozjaśnia skórę oraz pozytywnie wpływa na jej koloryt.

**Kosmetyki:** płyn micelarny, ampułka oczyszczająca, normalizująca/dla cery tłustej, mieszanej

**Czas trwania trybu:** 5 minut

**Częstotliwość:** co 2 - 3 dni

W celu głębszego oczyszczenia, złuszczenia martwego naskórka, a co za tym idzie lepszego wchłaniania składników aktywnych, rekomendujemy raz na 2 tygodnie wykonanie peelingu kawitacyjnego przy pomocy **Garett Beauty Sonic Scrub** bądź mikrodermabrazji urządzeniem **Garett Beauty Pure Skin**.

### 2. TRYB LIFTINGU (LIFT)

Przywraca elastyczność skóry, liftinguje i spłyca zmarszczki. Regeneruje mięśnie i stymuluje układ limfatyczny, modeluje owal twarzy. Działanie prądu EMS wzmocnione dodatkowo zostało światłem LED w kolorze żółtym. W czasie zabiegu można poczuć lekkie napięcie/szczypanie skóry. Intensywność zabiegu można regulować.

**Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat o działaniu liftingującym, odmładzającym, wygładzającym skórę.

**Czas trwania trybu:** 10 minut

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 3. TRYB WCHŁANIANIA (LEAD IN)

Spłyca zmarszczki, wysmukla owal twarzy. Różowe światło LED i fale radiowe RF pozytywnie wpływają na naskórek i ułatwiają przenikanie składników aktywnych w głąb skóry.

**Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat w zależności od potrzeb skóry (nawilżająca, odżywcza, normalizująca, rozjaśniająca, może być również w płacie)

**Czas trwania trybu:** 10 minut

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 4. TRYB PRZECIWSTRARZENIOWY (ANTI-AGING)

Połączenie prądów EMS, RF, rozgrzania skóry oraz czerwonego światła LED. Przyspiesza regenerację kolagenu w skórze, zwiększa jej elastyczność i witalność. Zapobiega przyszlęmu wiotczeniu skóry. Dodatkowo mikromasaż pobudza tkanki do regeneracji.

**Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat - preparaty o działaniu przeciwzmarszczkowym.

**Czas trwania trybu:** 10 minut

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

### 5. TRYB USUWANIA TRĄDZIKU (REMOVE ACNE)

Prąd jonizujący dodatni w połączeniu z niebieskim światłem LED poprawia krążenie krwi, działa przeciwzapalnie i bakteriobójczo, łagodzi trądzik oraz stany zapalne skóry.

**Kosmetyki:** ampułka/serum/koncentrat o działaniu normalizującym pracę gruczołów łojowych – dla skóry tłustej, zanieczyszczonej, problematycznej a także o działaniu rozjaśniającym skórę

**Czas trwania trybu:** 5 minut

**Częstotliwość:** co 10 - 14 dni

## Uwagi dla użytkowników

1. Przed użyciem tego produktu prosimy o uważne przeczytanie instrukcji i zachowanie jej na przyszłość.
2. Produkt jest ładowany za pomocą dołączonego zestawu ładującego.
3. Nie należy używać urządzenia oraz próbować go odłączać od gniazda mokrymi rękami.
4. Nie należy niszczyć, modyfikować przewodu zasilającego oraz produktu, ponieważ może to skutkować jego uszkodzeniem.
5. Należy unikać zabrudzeń portu ładowania i przewodu zasilającego.
6. Należy zaprzestać ładowania w przypadku uszkodzenia wtyczki, przewodu zasilającego lub nagrzewania się nawet jednego z elementów.
7. Używanie akcesoriów, które nie są dostarczane z tym produktem, może być niebezpieczne.

8. Nie przechowywać produktu w wilgotnych miejscach, wysokiej temperaturze, ponieważ może to spowodować porażenie prądem lub pożar.

9. W przypadku uszkodzenia należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się ze sprzedawcą lub bezpośrednio z serwisem firmy Garrett.

10. Nie należy używać urządzenia w okolicach skóry podrażnionej, uczulonej lub w stanie zapalnym.

**Patrz – przeciwwskazania.**

11. Nie pozostawiaj urządzenia w zasięgu dzieci.

Zabiegi urządzeniem **Garett Beauty Vital Skin** nadają się do każdego typu skóry, o każdej porze roku. Najlepiej w porze wieczornej tak, aby skóra miała czas na regenerację podczas snu. Podczas jednej sesji możesz korzystać z różnych trybów pracy urządzenia.

Dzięki terapii łączonej, efekty są jeszcze skuteczniejsze. Dobór trybów pracy urządzenia zależy od oczekiwanych efektów.

**Zaleca się serię 5 - 8 zabiegów, co 10 - 14 dni.**

**Pamiętaj, że tylko regularne stosowanie urządzenia przyniesie oczekiwane efekty, a cykliczność zabiegów pozwoli je utrzymać przez długi czas.**

**Nie należy wykonywać zabiegów bezpośrednio po korzystaniu z solarium, sauny, czy po opalaniu oraz bezpośrednio przed wyjściem na mróz.**

**Po zabiegu i w trakcie wykonywania serii należy zabezpieczać twarz kremem z filtrem SPF.**

## Naprawa i konserwacja

1. W przypadku uszkodzenia lub awarii prosimy o wstrzymanie użytkowania tego produktu i kontakt z serwisem firmy Garrett. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.

2. Po każdym użyciu należy dokładnie wyczyścić produkt. Nie należy używać w tym celu silnych detergentów i innych stymulantów do czyszczenia produktu.

3. Urządzenie nie jest całkowicie wodoodporne i nie należy myć go wodą.

4. Nie użytkując urządzenia przez dłuższy czas, zaleca się regularne ładowanie i przechowywanie urządzenia w suchym i chłodnym miejscu, aby przedłużyć jego żywotność.

## Gwarancja i reklamacja

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje: wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika bądź wskutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem), uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych wskutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie, materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt, należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączonej do urządzenia oraz wysłać ją wraz z dowodem zakupu i produktem na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie:


**www.garett.pl**

### Producent:

GARETT sp. z o.o.

25 - 520 Kielce

www.garett.pl

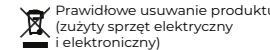

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. Informacje na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych mogą uzyskać w punkcie sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub w organów władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w P.R.C.